

FiNC


体組成計 ユーザーズガイド



-
- 1 基本的な使い方
 - 2 本体と FiNC アプリの連携方法
 - 3 データを記録する（自動）
 - 4 データを記録する（手動）
 - 5 本体ディスプレイ表示説明
 - 6 FiNC Smart Scale 本体仕様
 - 7 FiNC Smart Scale 利用規約
 - 8 FiNC Smart Scale 安全上のご注意
 - 9 FiNC Smart Scale 製品の保証について
 - 10 お問い合わせ先
-


1. 基本的な使い方

1

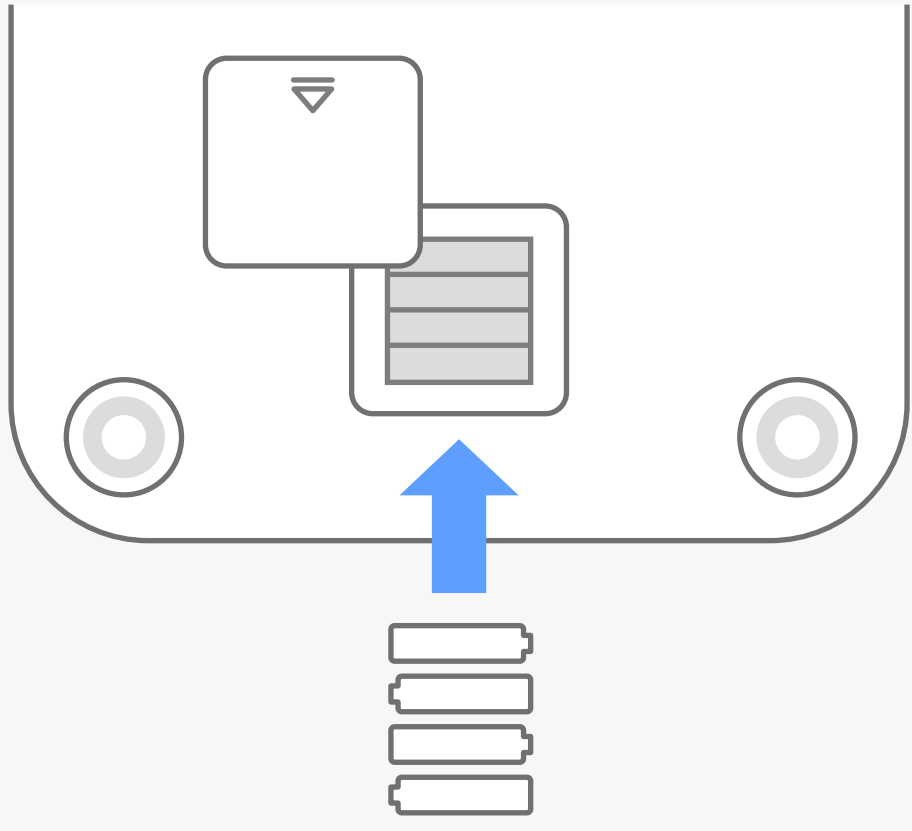


本体裏面から
単4電池4本を入れる

2

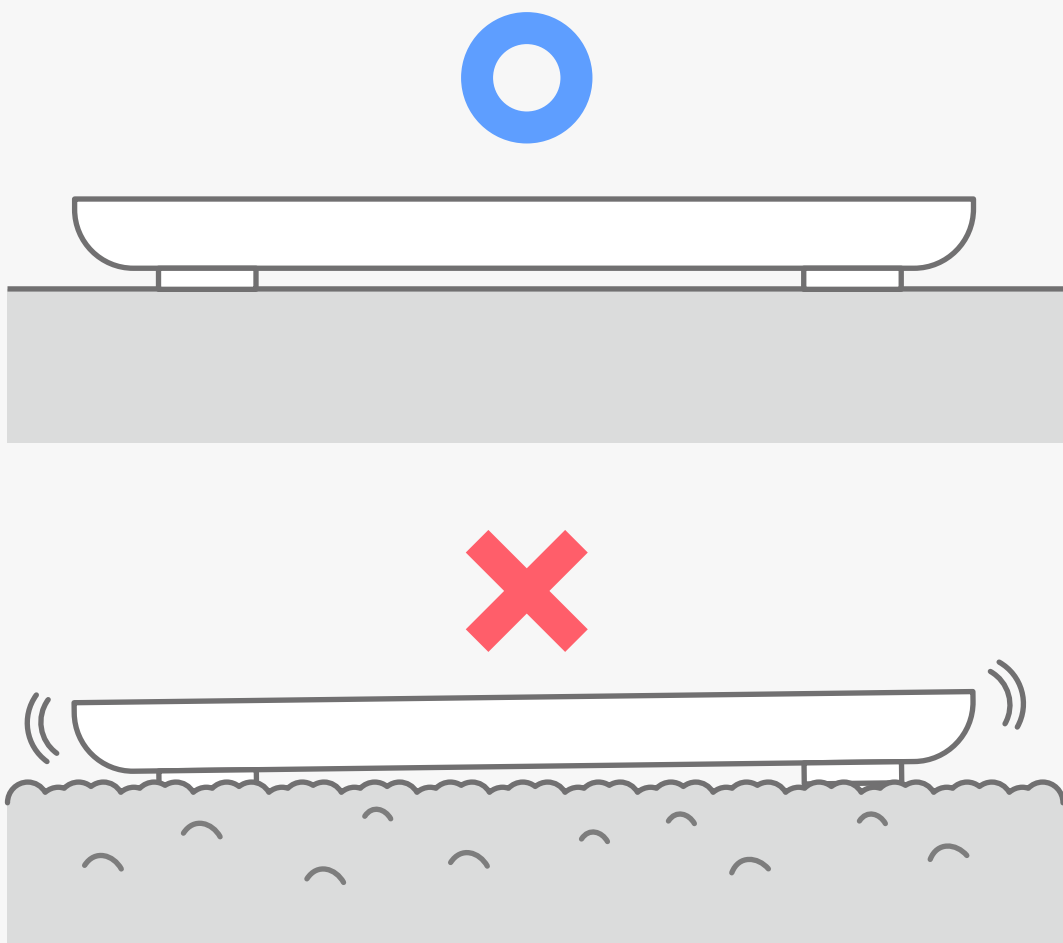


本体を水平な固い床に置く
(畳、カーペットなどでは正しく
計測できません)

3

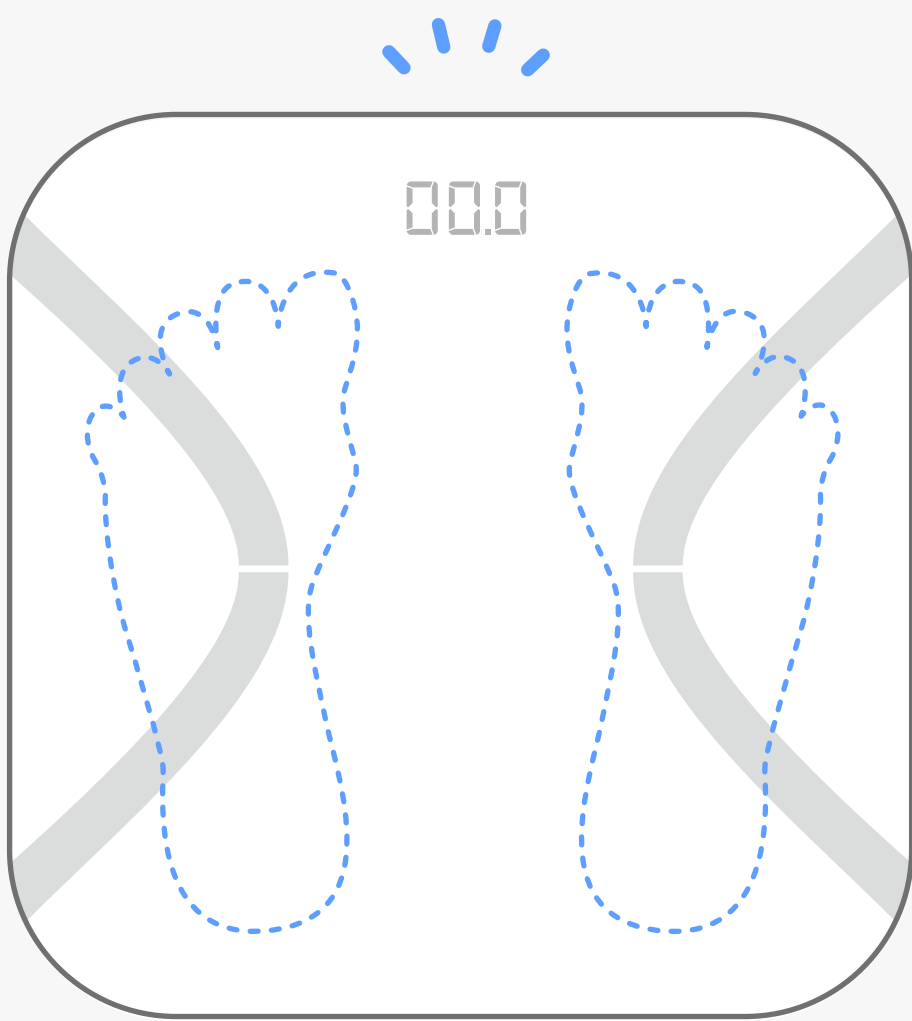

体組成計に乗ると自動で
電源が入ります
(素足以外では正しく計測されま
せん)

4

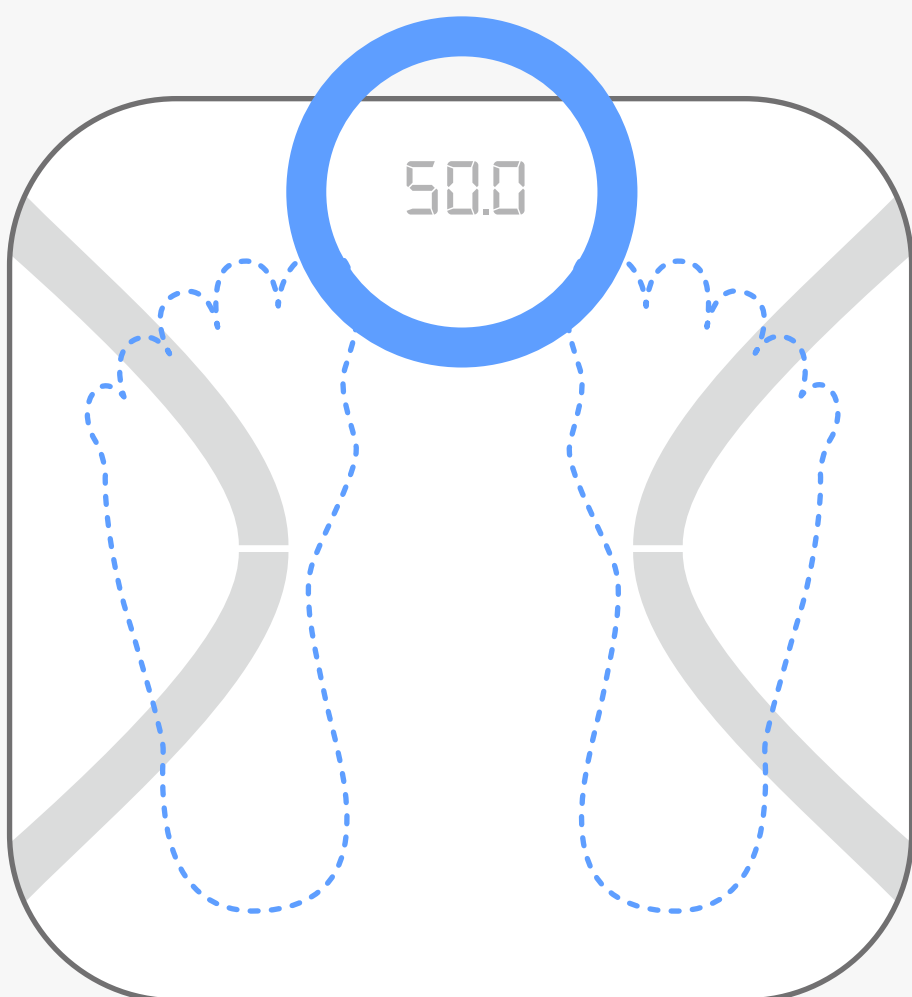


本体に体重が表示されます
(本体から降りると自動で電源が
切れます)

1. 基本的な使い方 - 体重計の補正


継続してお使いいただく場合、補正（CAL: キャリブレーション）を行います。

1

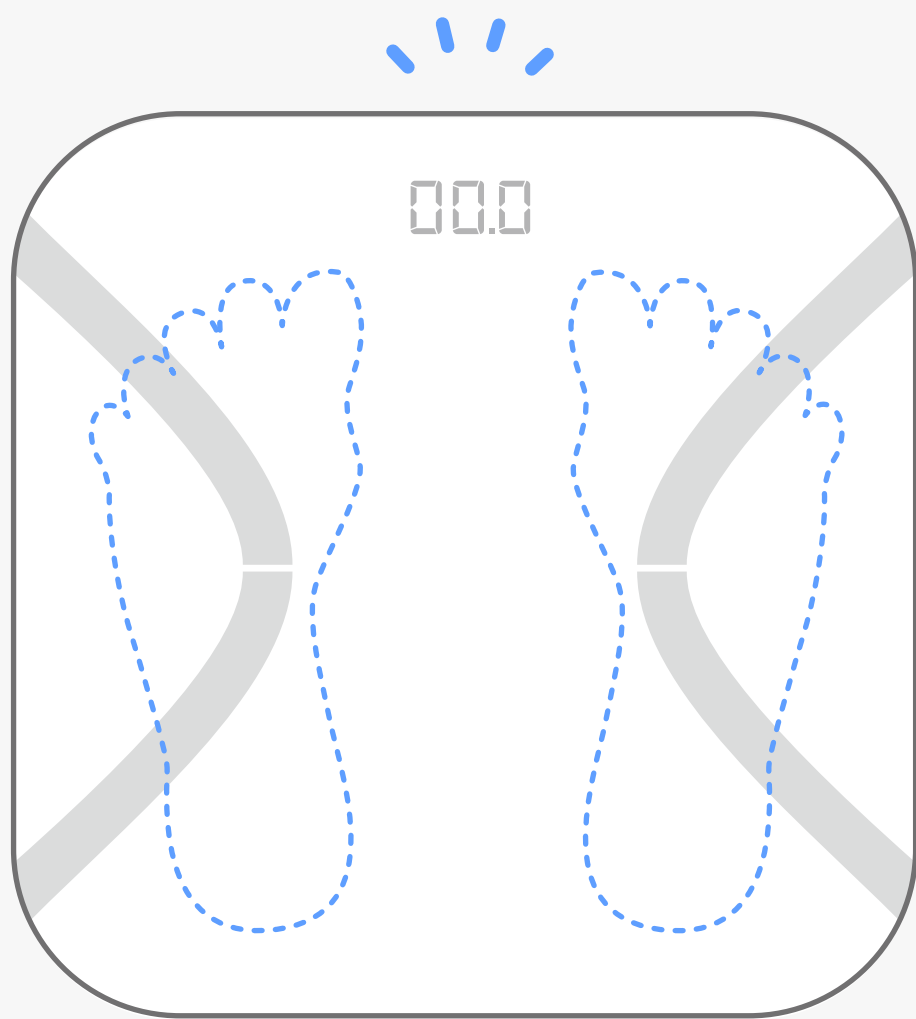

一度、体組成計に乗り「XX KG」と表示されたら、すぐに降りてください。

2

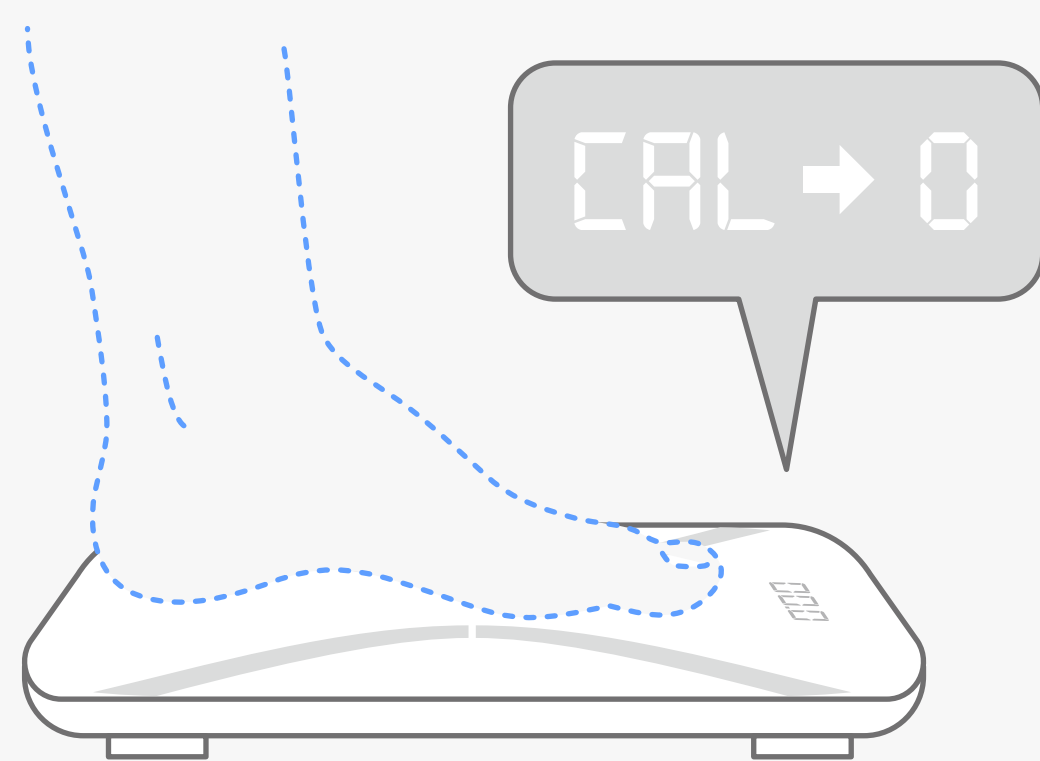

本体ディスプレイが「XX KG」→「CAL」→「0」に変われば補正は完了です。

3



補正完了後に体組成計に乗り測定を行います。

2. 本体と FiNC アプリの連携方法

1



スマートフォンの設定の Bluetooth を ON にし、FiNC アプリを立ち上げる

* 連携に失敗した場合は、位置情報サービスを ON にして再度お試しください。

2



画面左上のメニューバーをタップ

3




ページ下部のオプションから「データ設定」をタップ

4



外部サービス > 「FiNC Smart Scale」の **連携する** ボタンをタップ

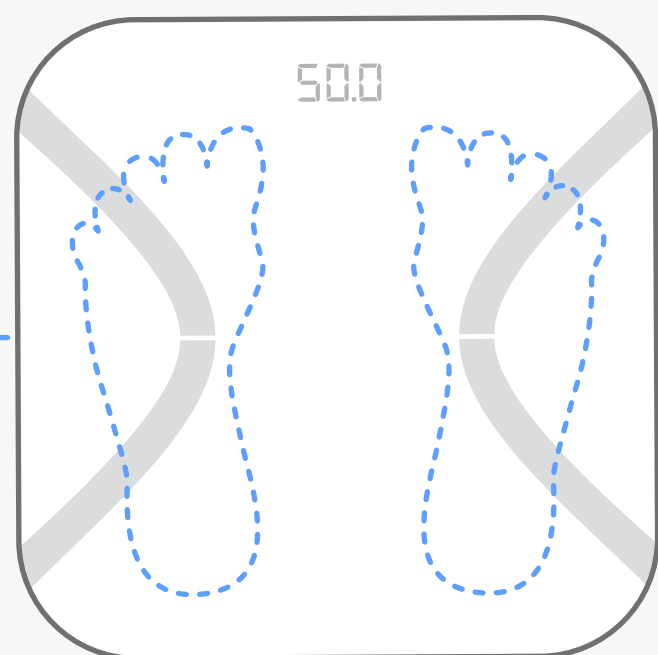

FiNC アプリを開き、マイデータをタップ後、本体に乗ると、体組成計との連携が開始されます

TIPS1


本体と FiNC アプリの接続が完了したら、測定を開始できます。データの記録方法が 2 種類ありますので、
P.5「3. データを記録する（自動）」
P.7「4. データを記録する（手動）」
どちらかの方法で測定データを記録しましょう。

TIPS2

連携ができない場合、④の画面にて [解除する] ボタンをタップし、再度 [連携する] ボタンをタップして、再連携をお試しください。

3. データを記録する（自動）


1

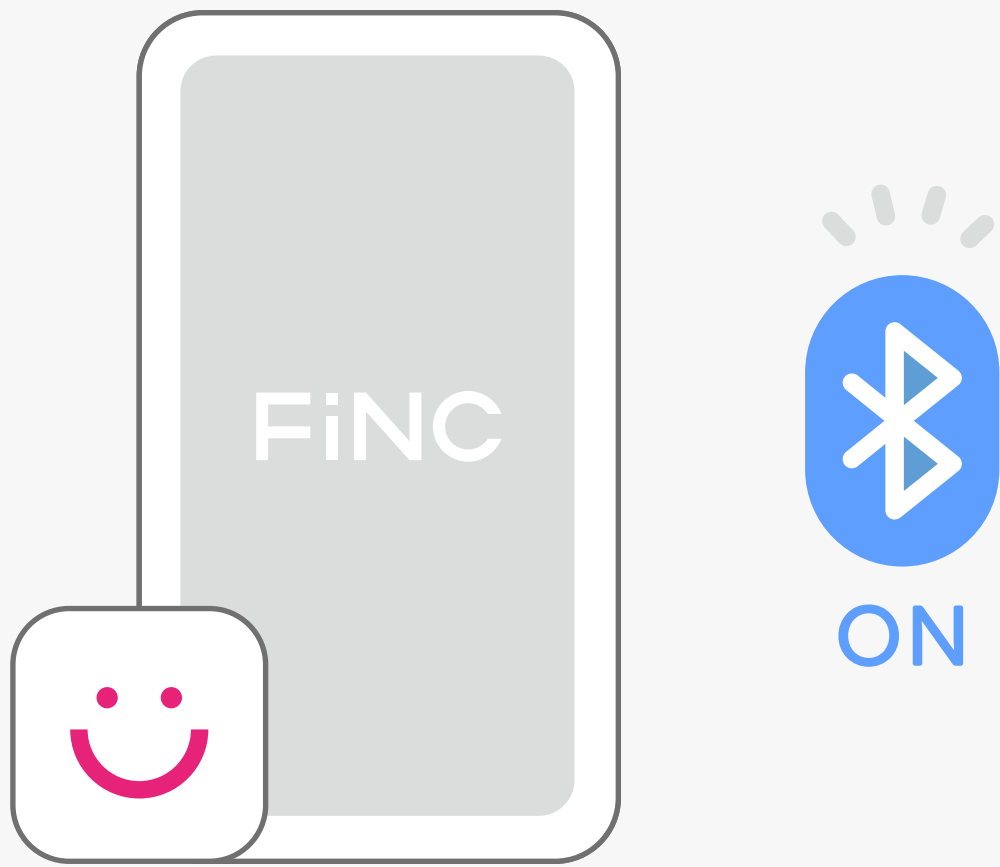

スマートフォンの
Bluetooth を ON にし、
FiNC アプリを立ち上げる

* 連携に失敗した場合は、位置
情報サービスを ON にして
再度お試しください。

2

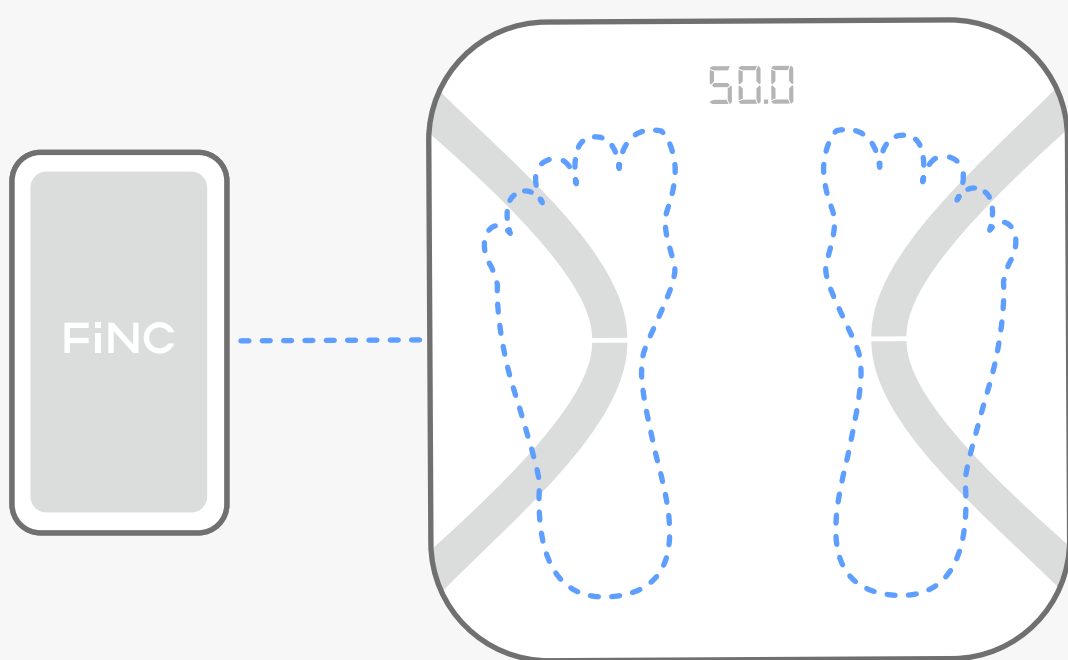

FiNC アプリを立ち上げて、
マイデータをタップし、本体
に乗ると、自動で体組成計が
検出され接続されます。

3



「FiNC 体組成計が見つかり
ました」と表示されたら、

データを受信

をタップ

4



「受信成功」と表示されたら
保存をタップし、データの
記録が完了

* 「通信に失敗しました」と表示され
る場合は手順 6 へ

5



「体重」「BMI」「体脂肪率」が表示されます。

(その他、体年齢など他の連携項目を確認したい場合は「もっと見る」をタップし、マイデータ>ライフログから全11項目を確認できます。)


6



「通信に失敗しました」と表示される場合、一旦本体から降り、「リトライ」をタップした後に手順③よりやり直してください

4. データを記録する (手動)

1

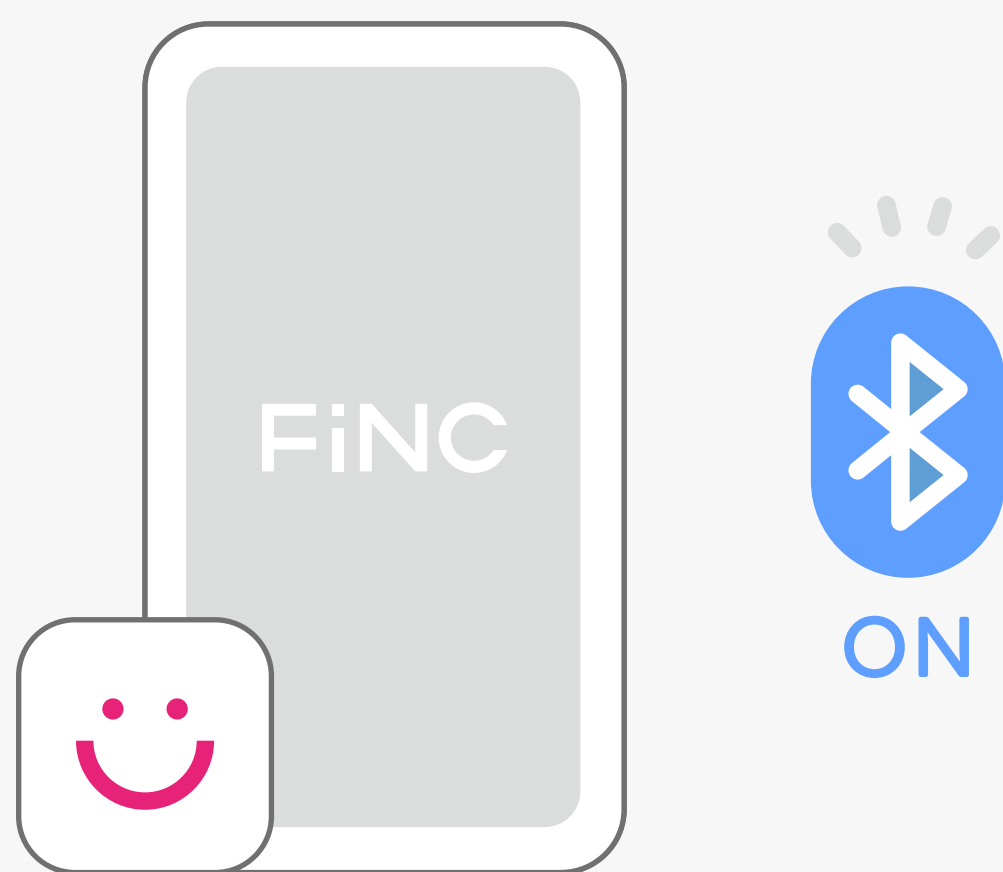

スマートフォンの
Bluetooth を ON にし、
FiNC アプリを立ち上げる

* 連携に失敗した場合は、位置
情報サービスを ON にして
再度お試しください。

2



きろく > 体重画面右下の
+マークをタップ後、
本体に乗り測定を開始します

3



アプリを開いたまま本体に
乗ると本体と FiNC アプリ
の通信が開始されます

4



「受信成功」と表示されたら
保存をタップし、データの
記録が完了

※「通信に失敗しました」と表示され
る場合は手順 6 へ

5



「体重」「BMI」「体脂肪率」
が表示されます

(その他、体年齢など他の連携項目を
確認したい場合は「もっと見る」を
タップし、マイデータ>ライフログ
から全11項目を確認できます。)

6



「通信に失敗しました」と
表示される場合、一旦本体
から降り、「リトライ」を
タップした後に手順③より
やり直してください

5. FiNC Smart Scale 本体ディスプレイ表示説明

52.0
* kg

正常

(表示なし)

電源が入っていない
電池残量がなくなった

52.0
kg

Bluetooth が
ペアリングしていない

Lo

低電力

EEr

過負荷

CAL

準備中
表示が消えてから乗る

6. 本体仕様

製品名	FiNC SmartScale
カラー	ホワイト, ブラック
型番	CS20E-mini
パッケージ寸法	298mm (幅) × 298mm (高さ) × 40mm (厚さ)
外形寸法 (本体)	260mm (幅) × 260mm (高さ) × 25mm (厚さ)
質量	約 1.1kg
通信方式	Bluetooth 4.0
通信距離	約 10m
動作温度範囲	5°C~35°C
動作湿度範囲	15%~90%
電源	単四電池 ×4 個
測定項目	全 11 項目
	体重: 0~150kg (100g 単位)
	体脂肪: 5.0~70.0% (0.1% 単位)
	BMI: 0~50 (0.1 単位)
	基礎代謝: 0~3000kcal (1kcal 単位)
	内臓脂肪レベル: 0-20 (1 単位)
	皮下脂肪レベル: 男性 4.3-33.4% 女性 9.35-53.4% (0.1% 単位)
	身体年齢: 0~100 歳 (1 歳単位)
	骨レベル: 男性 1.15-6.8kg 女性 0.8-5.4kg (10g 単位)
	骨格筋レベル: 男性 24.5-100% 女性 20-100 % (0.1% 単位)
	水分量: 男性 27.5-100% (0.1% 単位) 女性 22.5-100% (0.1% 単位)
	タンパク質: 男性 8-36% 女性 7-32% (0.1% 単位)
使用材料	ABS+ 強化ガラス

7. FiNC SmartScale 利用規約

本規約は、スマート体組成計「FiNC SmartScale」(以下「本機」といいます。)を、株式会社FiNC Technologies (以下「FiNC」といいます。)が提供するFiNCアプリと連携させ、FiNCアプリで測定結果を閲覧および利用について定めています。本機のご利用にあたっては、本規約にご同意いただく必要があります。あわせて、その他体組成の取扱説明書、クイックスタートガイドなどを併せてご確認ください。

第1条（定義）

「本サービス」とは、本機およびBluetooth通信を利用した本機の測定結果を閲覧するASPサービスをいいます。

第2条（適用：レンタルご利用の方）

保証の否認など本規約に定めがない事項については、本規約に別紙として添付されたFiNCアプリ基本利用規約等が適用されます。

第2条（適用：購入してご利用の方）

保証の否認など本規約に定めがない事項については、FiNCアプリ基本利用規約、無料修理・交換規定等が適用されます。

第3条（通信および本サービスの利用の制限又は停止）

- FiNCは、以下に定める場合に通信を一時制限または本サービスの停止を行うことができるものとします。
 - 技術上、保守上、FiNCの事業上やむを得ない事由が生じた場合
 - 天災、災害その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合
 - 通信回線が輻輳している場合
 - FiNCまたは協定事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ない事由が生じた場合
- 前項の場合、ユーザーはFiNCに対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償、補償も請求することはできません。

第4条（禁止事項等）

ユーザーは、FiNCアプリ基本利用規約に定める禁止事項の他、以下の各号のいずれかに該当する又は該当する恐れがあると当社が判断する行為をしてはならないものとします。

- 本機を取り外し、変更し、分解する行為（ただし、天災その他の事態に本機を保護する必要があるときはこの限りではない）
- 本機を海外で利用する行為
- 本機をFiNCアプリ又はFiNCが指定するアプリ・機器以外と連携させる行為
- FiNCアプリの登録の際に、虚偽の情報を登録する行為

第5条（利用停止）

- FiNCはユーザーが以下の各号に定める事項に該当する場合又は該当する恐れがあるとFiNCが判断する場合、本サービスの利用を停止することができるものとします。
 - 本サービスが他のユーザーに重大な支障を与える態様で使用されたとき。
 - 本サービスが違法な態様で使用されたとき。
 - 前各号のほか、本規約の定め違反する行為が行われたとき。
- 本条に基づく本サービスの利用停止について、ユーザーは、損害賠償または本サービスの料金（本機の料金を含む。）の全部または一部の返金ができないものとします。

第6条（本サービスの廃止）

FiNCは、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。

FiNCは、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前にユーザーに告知します。

第7条（体組成計データの取り扱い）

FiNCは体組成計データをFiNCのプライバシーポリシー（その他個人情報の取り扱いに関する規約を含む。）に従い取り扱います。特に、FiNCは体組成計データを、本サービスの提供、本サービスの改善開発、新規サービスの開発、本サービスに関連したキャンペーンの実施、マーケティング調査・統計・分析、研究、当社各種サービス・商品・キャンペーンなどのご案内を送るため、利用します。

（附則）

制定日：2018年10月3日

改定日：2019年3月8日




8. 安全上のご注意

ここでは、安全に正しくご使用いただくためにお守りいただきたいことを説明しております。本文をよくお読みいただき、安全に正しく使ってください。

こちらに記載する事項は、ご使用いただく方や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐためにお守りいただきたいことを説明しております。必ずお守りください。

表示の説明




次の表示区分はお守りいただく内容を説明しています。しています。内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

 危険	この表示は取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。
 警告	この表示は取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
 注意	この表示は取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される」内容を示しています。

絵表示の説明

 禁止	してはいけない（禁止）内容を示しています。	 分解禁止	分解してはいけないことを示します。
 指示	必ず守っていただく内容を示しています。	 水濡禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。



危険

 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">● 分解や改造、ハンダ付けなどお客様による修理はしないでください。 火災、ケガ、感電などの事故または故障の原因となります。また、電池の漏液、発熱、破裂、発火などの原因となる場合があります。本機の改造は電波法違反となり、罰則の対象となります。
 水濡禁止	<ul style="list-style-type: none">● 濡らさない 本機を濡れたまま放置すると、故障の原因となります。使用場所や取扱いにご注意ください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 高温になる場所（こたつ、火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の社内）での使用、放置はしない。浴室やサウナなど高温多湿環境では使用しない。 機器の故障や発熱、発火の原因となります。

警告

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● ペースメーカーや人工呼吸器をご使用の方、また ECG とほかの内部医療装置をご使用の方、妊娠中や熱のある方は使用しない 本機は微弱な電流を体内に流しますので、威容電気機器の誤作動尾による重大な事故の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 測定結果を自己診断しない 本機は検査や治療を目的としたものではありません。健康等が気になる場合は、医師など専門家にご相談ください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本機の上で跳びはねたり、飛び乗ったり、端に乗らない 破損、転倒やそれに伴うケガのおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 濡れた床やタイルなどすべりやすいところでは使用しない 転倒やそれに伴うケガのおそれがあります。 また本機に水が浸入することにより故障の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 本機の上に物を落とす、飛び乗る、本機を投げるなどの強い衝撃をあたえない ガラスが破損し、ケガをするおそれがあります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 測定可能な体重の上限は 150Kg です。上限を超える方はご使用をお控えください 製品の故障の原因となります。
 指示	<ul style="list-style-type: none">● 他の通信機能付きの機器や電子レンジ、ワイヤレス電話などの電波を発する家電製品を本機の近くで使用しないでください 誤作動をおこし正しく計測できないおそれがあります。また、本機が起動して不要な無線接続が発生して電池寿命に影響を及ぼす影響があります。 電線や鉄道架線、発電所など、外部環境によっても干渉する場合があります。そのような環境下においては可能な限り遠くに離れた場所で使用してください。
 指示	<ul style="list-style-type: none">● 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、使用しないでください 電子機器が誤作動するなどの影響を与えるおそれがあります。 ※例：植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器、補聴器、その他医用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など
 指示	<ul style="list-style-type: none">● 航空機内では使用しないでください 航空機の安全に支障をきたす恐れがあります。航空機内で電波を発するも電子機器の電源を入れることは法律で禁止されており、罰則の対象となります。



注意

 禁止	<ul style="list-style-type: none">● すき間や穴に、指や爪を入れない けがや故障の原因となります。
 禁止	<ul style="list-style-type: none">● 充電式の電池を使用しない 交渉電圧 1.2V 以下の充電式電池は本機の動作に必要な電圧が得られないため、誤作動や故障の原因となります。

 禁止	● 種類の違う電池、古い電池と新しい電池を同時に使用しない 液漏れや発熱、破裂のおそれがあり、本機の故障やけがの原因となります。
 禁止	● 乳幼児には持ち運びをさせない 落としてけがの原因となります。
 禁止	● 業務用として使用しない 病院などで使用するための機能は備えておりませんので、病院では使用しないでください。
 禁止	● ぐらつく台の上や傾いたところなど、不安定な場所には置かない 落下によるけがや故障の原因となります。
 指示	● 小さなお子様が使用する際は保護者が付き添い、取扱い方法を教えてください
 指示	● からだの不自由な方は、介護の方の付き添いのもとご使用ください 転倒をしてけがをするおそれがあります。
 指示	● 濡れた体で乗らない 体や足の水分を十分に拭いてから使用してください。転倒してけがをするおそれがあります。また、正しく測定できない原因となります。
 指示	● お手入れに熱湯やベンジーは使用しないでください 汚れたときは、水または家庭用中世洗剤をできるだけ柔らかな布に浸し、かたく絞ってから軽く拭き、その後乾いた布で拭きとってください。
 指示	● 電池の極性方向（+-）を間違えずに入れてください
 指示	● 分解や水洗いはしないでください 故障や損傷の原因となります。



医療電気機器近くでの取り扱いについて

 指示	● 植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器を装着されている場合は、ペースメーカー等の装着部分から 15cm 以上離して使用してください。また、持ち運びの際も同様です。 電波により植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。
 指示	● 自宅療養など医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器以外の威容電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に威容電気機器メーカーなどにご確認ください。 電波により威容電気機器の作動に影響を与える場合があります。

9. 製品の保証について

[無料修理・交換規定]

- FiNC SmartScale（体組成計）（以下「本製品」といいます。）を取扱説明書、貼付ラベル等の注意書きに基づき、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償で代替品と交換いたします。
- 本製品の保証期間は、本製品の購入から1年間です。
- 故障による交換につきましては、下記のFiNCサポートセンターまでご連絡ください。ご連絡の際に、本体裏面のシールに記載されている「体組成計管理番号」をお知らせください。
- 代替品との交換にあたっては、本体に記録されたデータや設定の引き継ぎは行われません。
- 故障による交換が行われた場合も、保証期間（購入から1年間）は延長されません。
- 次の場合は、保証期間内であっても、交換の対象とはなりません
 - 仕様の範囲を超えた使用および使用上の誤りによる故障及び損傷がある場合
 - 故障の原因が本製品以外（電池など）の機器にある場合
 - 当社指定以外の付属品および部品を用いた改造による故障及び損傷がある場合
 - ご使用中の落下、水の侵入及び圧迫などによる故障及び損傷または落下、水没、水濡れなどの痕跡がある場合
 - 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変及び公害、塩害など不慮の事故による故障及び損傷がある場合
 - 著しくゴミ、ホコリなどが付着している場合
 - 消耗部品の交換
- 本製品が不当に修理や分解、改造をされた場合は、交換をお受けできない場合があります。
- 本製品の故障に起因する付随的損害については責任を負いかねます。
- 本製品を指定以外の機器と接続した場合に万一発生する事故については責任を負いかねます。
- 保証期間の1年間を超えた場合、交換対応はできません。
- 本保証は、日本国内のみにおいて有効です。

以上

10. お問い合わせ先

FiNC
Technologies

お問い合わせ先：FiNC サポートセンター

営業時間：平日：9:30-17:30

メール：support-fincapp@finc.com

ホームページ：http://finc.com



® 210-116177